

Bảng cỡ & Mã số sản phẩm/Size and product code:

Chiều dài sản phẩm/ Length of product (cm)	40	50	60	70
Mã số sản phẩm gối 0°/ Product code	760	770	780	790
Mã số sản phẩm gối 20°/ Product code	706	707	708	709

Hướng Dẫn Sử Dụng
NET GỐI H3 - gối 3 mảnh
Knee Immobilizer H3



Chức năng:

- Hỗ trợ và ổn định khớp gối, căng chân, hạn chế vận động theo chỉ định điều trị.
- Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối, căng chân.

Chỉ định:

- Sơ cứu cố định sau chấn thương khớp và quanh khớp gối.
- Hỗ trợ, cố định, hạn chế vận động sau phẫu thuật quanh khớp gối.
- Hỗ trợ, cố định cho các chấn thương ở đùi, căng chân theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.

Vật liệu:

- Vải cotton, vải tricot, mút xốp PU.
- Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm được anod hóa bề mặt.

Bảo quản:

- Để nơi khô mát.
- Có thể giặt bằng tay trong nước có xà phòng, phơi khô nơi thoáng.
- Không giặt và làm khô bằng máy (không dùng thuốc tẩy).




Hướng dẫn sử dụng:

- Tư thế bệnh nhân: Nằm hoặc ngồi duỗi gối.
- Kiểm tra nẹp: Lựa chọn chiều dài nẹp phù hợp với bệnh nhân. Lấy nẹp ra khỏi túi, để các dây đai ở tư thế mở.

Bước 1: Kiểm tra vị trí 2 thanh nẹp cạnh đã phù hợp với chân chưa. Có thể điều chỉnh 2 thanh nẹp cạnh bằng cách dịch chuyển ra hoặc vào sao cho 2 thanh nẹp cạnh nằm vào 2 cạnh bên của chân. (Nhà sản xuất đóng gói ở cỡ trung bình). (ảnh A+B)

Bước 2: Đặt nẹp phía sau gối sao cho mảnh nẹp to ôm lấy kheo chân theo đúng đường cong sinh lý. (ảnh C)

Bước 3: Cố định nẹp vào vùng tổn thương theo trình tự dây đai giữa trước, tiếp đến dây trên và dưới. Mức độ điều chỉnh theo từng nấc từ lỏng đến chặt, đảm bảo đủ chắc, không gây đau và chèn ép tuần hoàn. (ảnh D)

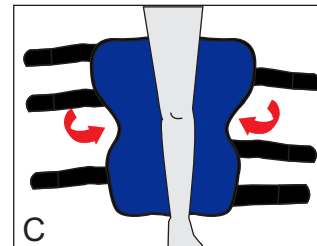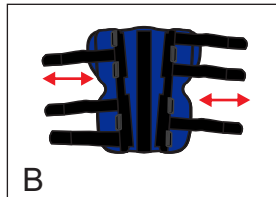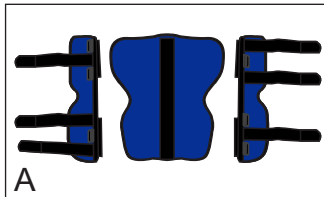

Functions:

- Supports and stabilizes the knee joint and lower leg; restricts movement as prescribed.
- Assists in immobilizing the area around the knee joint and lower leg.

Indications:

- First aid immobilization for injuries to the knee joint and periarticular region.
- Support, immobilization, and motion restriction following knee surgery.
- Support and immobilization for thigh and lower leg injuries as directed by a specialist physician.

Materials:

- Cotton fabric, tricot fabric, PU foam.
- Velcro straps, anodized aluminum alloy splints.

Preservation:

- Putting in dry place.
- Washing by hands with soap and water, drying in cool place.
- Do not wash and dry by washing machine (No using bleach).

Instructions For Use:

- Patient position: lying or sitting with knees stretched.
- Brace check: Select the brace size suitable for the patient. Remove the brace from the bag, disassemble and check the 3 pieces of the brace, leaving the straps open.
 - Step 1: Check whether the positions of two side splints fit the leg properly. The side splints can be adjusted by moving outward or inward so that they align with two sides of the leg (The manufacturer packs the product in medium size). (picture A+B)
 - Step 2: Place the brace behind the knee so that the large panel fits the popliteal fossa following its natural curve. (picture C)
 - Step 3: Secure the brace to the injured area in the following order: first the middle belt strap, then the upper and lower straps. Tighten the straps gradually, ensuring that they are secure but do not cause pain or restrict circulation. (picture D)