

BỘ Y TẾ
VIỆN TRANG THIẾT BỊ
VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 201620 /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Gia Bảo Hưng

Địa chỉ: Số 145, Đường Hoàng Diệu, Tổ 10, Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Tên sản phẩm: GREEN LIFE FACE MASK

Model: GBH.01

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Gia Bảo Hưng

Xuất xứ: Việt Nam


Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

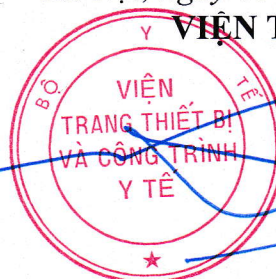

TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật


TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Gia Bảo Hưng cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 04/05/2020.*

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGƯỜI THỬ NGHIỆM


Nguyễn Văn Hùng


Lê Đức Hà