

HỆ THỐNG THEO DÕI ĐA CHỨC NĂNG Multi-Functional Monitoring Systems



Hệ thống theo dõi cá nhân đa chức năng FORA® 6 Series dùng để theo dõi, kiểm tra đường huyết cá nhân (BG), nồng độ hematocrit (HCT), huyết sắc tố (HB), β -Ketone (KB), axit uric (UA) và cholesterol toàn phần (TCH), một cách đơn giản, chính xác và đáp ứng tiêu chuẩn ISO 151972.



Đèn báo sáng khi gắn que thử

Thiết kế nút nhà que để giảm khả năng lây nhiễm chéo

3 biểu tượng: Tổng quát (Gen), trước ăn (AC), sau ăn (PC), chế độ QC để kiểm tra với dung dịch kiểm chứng

Bộ nhớ 1000 ca, với thông tin ngày giờ

1 x AAA

Self life: 60 tháng



Máy đo đa chức năng
Model: GD81 (Fora 6 Plus),
GD82 (Fora 6 Connect)

Kết nối Bluetooth chuyển dữ liệu (**Fora 6 Connect only**)

Màn hình khổ lớn với đèn nền màu trắng, dễ đọc kết quả dễ dàng

Ghi lại kết quả đo có kèm thời gian đo


Phím điều khiển cao su điều chỉnh lên, xuống, M – Menu, dễ dàng sử dụng và làm sạch



Que thử với công nghệ ASSI vượt trội

Công nghệ Sip-in tiên tiến (ASSI)

- Độ chính xác cao với 5 điện cực làm bằng vàng
- Chất lượng cao với thời hạn sử dụng lâu dài
- CV < 5%
- Phạm vi HCT 0%~70%
- Mức độ chính xác cao với Enzyme GDH-FAD

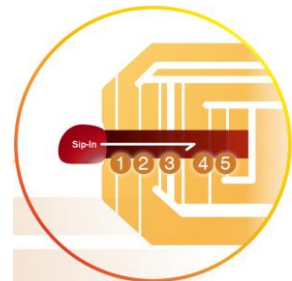

Độ chính xác

Theo kết quả thử nghiệm, CV của độ lặp lại lần lượt là 2,74% và 2,48% đối với mẫu tĩnh mạch và mao mạch. 100% giá trị glucose đo được từ các mẫu máu tĩnh mạch và mao mạch (đầu ngón tay) nằm trong khoảng ± 15 mg/dL (0,83 mmol/L) so với kết quả đo so sánh trung bình ở nồng độ glucose <100 mg/dL (5,55 mmol/L) hoặc trong khoảng $\pm 15\%$ khi nồng độ glucose >100 mg/dL (5,55 mmol/L).

Nhà sản xuất:

ForaCare Suisse AG

Neugasse 55, 9000 St. Gallen, Switzerland

Nhà nhập khẩu, phân phối:

CTY CP Công Nghệ Sinh Học Thuy An

253/14 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM

Web: thuyanbio.com Email: thuyanbio.hcm@gmail.com

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT (BG)



- Model: ACS045
- Thể tích mẫu: 0.5 μ L
- Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh, máu tươi toàn phần, AST.
- Phạm vi đo:): 10 ~ 600mg/dL
- Thời gian phản ứng: 5 giây
- Phạm vi Hematocrit: 0 ~ 70%
- Enzyme: GDH-FAD
- Đối tượng sử dụng: Người bệnh tiểu đường, chạy thận nhân tạo, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, khám bệnh tổng quát, tiểu đường thai kỳ, trẻ em, trẻ sơ sinh.
- Coding tự động
- Self life 24 tháng

QUE THỬ 3 IN 1 (BG-HCT-HB)



- Model: ACS051
- Que thử đo 3 chỉ số: đường huyết (BG), Hematocrit (dung tích hồng cầu – HCT), và Hemoglobin (HB)
- Thể tích mẫu: 0.5 μ L
- Thời gian phản ứng: 5 giây
- Phạm vi đo:
 - ✓ Hematocrit (HCT): 0 ~ 70%
 - ✓ Đường huyết (BG): 10 ~ 600mg/dL
 - ✓ Hemoglobin (HB): 0 ~ 23.8g/dL
- Enzyme: GDH-FAD
- Đối tượng sử dụng: Người bệnh tiểu đường, chạy thận nhân tạo, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường thai kỳ, trẻ em, trẻ sơ sinh.
- Coding tự động
- Self life 18 tháng

QUE THỬ β -KETONE (KB)



- Model: ACS053
- Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, máu tươi toàn phần
- Thể tích mẫu: 0.8 μ L
- Đối tượng sử dụng: Bệnh nhân tiểu đường
- Thời gian phản ứng: 10 giây
- Phạm vi đo: 0.1 ~ 8.0 mmol/L
- Enzyme: β -Hydroxybutyrate Dehydrogenase
- Sử dụng mã code
- Self life 18 tháng

QUE THỬ URIC ACID



- Model: ACS057
- Thể tích mẫu: 1.0 μ L
- Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, máu tươi toàn phần
- Đối tượng sử dụng: Bệnh nhân tiểu đường, người bệnh gút
- Thời gian phản ứng: 15 giây
- Phạm vi đo: 3 ~ 20 mg/dL
- Enzyme: Uric acid catalyst
- Sử dụng mã code
- Self life 18 tháng

QUE THỬ CHOLESTEROL TOÀN PHẦN (Total Cholesterol - TCH)



- Model: ACS055
- Thể tích mẫu: 3.0 μ L
- Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, máu tươi toàn phần
- Đối tượng sử dụng: Bệnh nhân tiểu đường, người bệnh tim mạch, người mắc hội chứng chuyển hóa
- Thời gian phản ứng: 60 giây
- Phạm vi đo: 100 ~ 400 mg/dL
- Enzyme: Cholesterol esterase / Cholesterol oxidase
- Sử dụng mã code
- Self life 18 tháng



Nhà sản xuất:

ForaCare Suisse AG

Neugasse 55, 9000 St. Gallen, Switzerland

Nhà nhập khẩu, phân phối:

CTY CP Công Nghệ Sinh Học Thuy An

253/14 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. HCM

Web: thuyanbio.com Email: thuyanbio.hcm@gmail.com