

DEKA
Innate Ability

THE NEW **PRO SYSTEM**

onda
PRO

**Công nghệ PGW
Precision-GigaWave
Một bước tiến vượt bậc của
Coolwaves**

Cuộc cách mạng trong kiến tạo đường nét khuôn mặt
không xâm lấn

ONDA PRO nổi bật trong **Thẩm mỹ** và **Da liễu**



ONDA PRO

SỰ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC

NÂNG CƠ & ĐỊNH
HÌNH ĐƯỜNG NÉT
KHUÔN MẶT

SẼN CHẮC DA

GIẢM MỠ

DA SẼN VỎ CAM
(CELLULITE)



Nguyên lý chính

Sau thành công của nền tảng ONDA, DEKA đã cho ra mắt một tay cầm đặc biệt, giới thiệu một phương thức điều trị mới: PGW (Công nghệ Precision-GigaWave), cho phép CoolWaves tác động một cách chính xác và có chọn lọc hơn, nhờ đó mở rộng ứng dụng Coolwaves® cho điều trị vùng mặt một cách an toàn, hiệu quả và không xâm lấn.

Tay cầm mới nâng cao hiệu suất của ONDA PRO: POCKET, đặc trưng bởi tác động sâu để tạo hiệu ứng săn chắc và nâng cơ, đồng thời giảm mỡ dưới da.

ONDA PRO là công nghệ mới và duy nhất mang tính cách mạng trong kiến tạo và định hình đường nét khuôn mặt.

Đồng thời ba tác động của ONDA PRO:

Nâng cơ


Nhờ Công nghệ PGW độc quyền của mình, Coolwaves của ONDA PRO thậm chí còn có tính chọn lọc cao hơn với hiệu quả căng da rõ rệt, từ đó tạo ra hiệu ứng nâng cơ mạnh mẽ

Săn chắc

Tác động sâu vào lớp hạ bì tạo ra sự co rút ngay lập tức của các sợi collagen và tăng sinh collagen mới làm cho các mô trở nên săn chắc và đàn hồi

Da sần vỏ cam và Giảm mỡ

Công nghệ Coolwaves và PWG phá hủy sâu lớp màng tế bào mỡ dưới da. Đem lại kết quả cải thiện đường nét tối ưu cho cả mặt và cơ thể

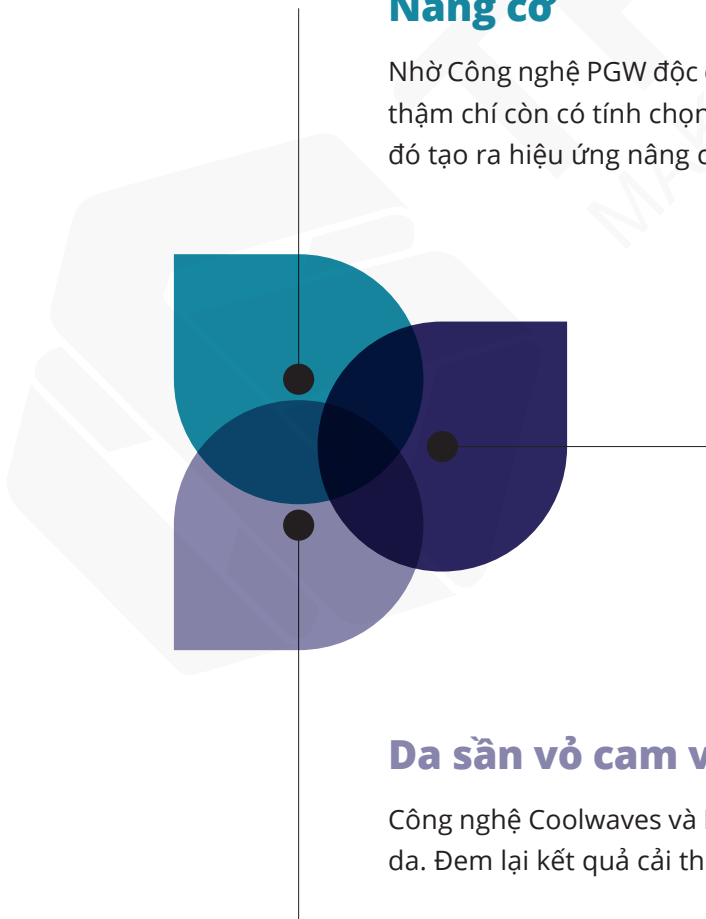



NỀN TẢNG KHOA HỌC

Tay cầm POCKET:

Với thiết kế công thái học để tối ưu hiệu quả điều trị vùng mặt



Kiểm soát hoàn toàn

Tay cầm được thiết kế đặc biệt để phát xạ **Coolwaves®** một cách có kiểm soát. Nhờ công nghệ PGW mới, năng lượng chỉ tập trung ở những nơi cần điều trị (tùy thuộc vào tay cầm để tác động đến từng độ sâu khác nhau) và **đảm bảo hoàn toàn không tổn thương đến các mô xung quanh.**

Độ sâu khác nhau cho những ứng dụng điều trị khác nhau

Bộ ba tay cầm: **Deep, Shallow và Pocket** tác động đến từng độ sâu khác nhau. Mỗi tay cầm được thiết kế cho từng **vùng chuyên biệt trên cơ thể** và **ứng dụng điều trị đặc hiệu.**



Pocket*

Tốt nhất cho **Nâng cơ | Săn chắc da vùng mặt**



Shallow*

Tốt nhất cho **Da sần vỏ cam | Săn chắc da | Giảm mỡ vùng mặt**



Deep*

Tốt nhất cho **Mỡ cục bộ**

Hệ thống làm lạnh thông minh

Hệ thống làm mát da tiếp xúc được tích hợp vào đầu tay cầm nhằm cân bằng nhiệt do tác động của vi sóng. **Lớp bề mặt da được bảo vệ, đảm bảo hoàn toàn sự thoải mái cho bệnh nhân** và giảm thiểu tác dụng phụ cũng như viêm nhiễm.


* Tay cầm tùy chọn



NỀN TẢNG KHOA HỌC

Công nghệ PGW và cơ chế tác động

Năng lượng vi sóng được truyền tới mô đích: Công nghệ mới với năng lượng được giới hạn chính xác hơn, tạo ra những hiệu ứng khác nhau ở vùng được điều trị với những độ sâu tác động khác nhau.

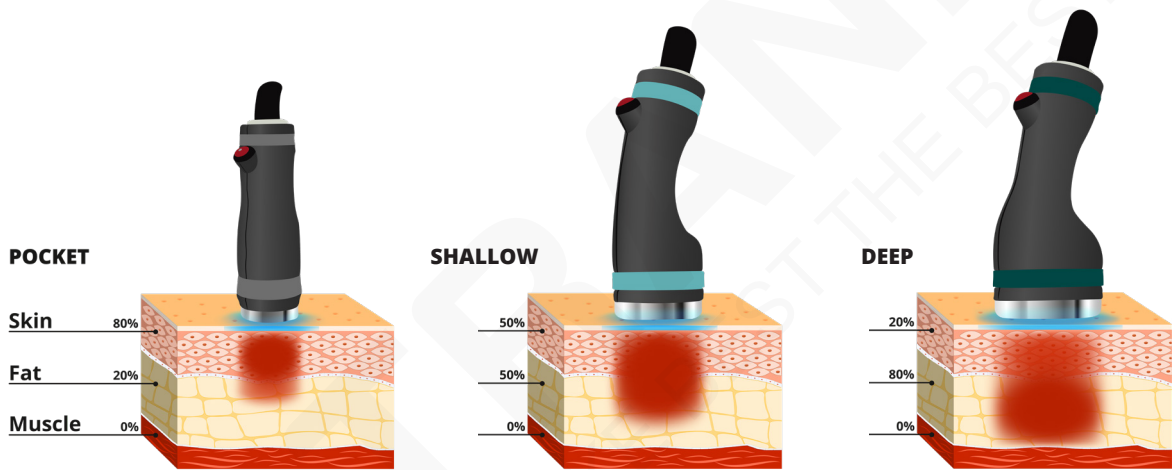

Kết quả lâm sàng

INNATE ABILITY



Courtesy of
Neoasia (Singapore)



Courtesy of
Prof. Paolo Bonan, MD
Dermatologist (Italy)



Courtesy of
Dr. Anna Claudia Butera, MD
Dermatologist (Italy)



Courtesy of
Dr. Joseph SeokBae Seo, M,D
Dermatologist (South Korea)



Coolwaves và PGW - CÔNG NGHỆ BỨT PHÁ MỚI NHẤT trong thẩm mỹ

Coolwaves được giới thiệu vào năm 2018 và là công nghệ đầu tiên trên thế giới sử dụng vi sóng đặc biệt an toàn để điều trị mỡ cục bộ, da sần vỏ ca và tình trạng da chùng nhão trên toàn cơ thể, đặc biệt là ở bụng, đùi và hông: vi sóng làm tan mỡ, săn chắc và tạo đường nét cho da, đồng thời tái cấu trúc các mô.



Nhờ vào hiệu quả của Công nghệ

PGW mới

(Precision-GigaWave)

Vi sóng là phương thức điều trị được nhiều Ngôi sao tin cậy và sử dụng nhất tại USA.

Chia sẻ của Bác sĩ

“Tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm sử dụng những hệ thống RF và các thiết bị năng lượng tương tự khác, tuy nhiên, gần đây, khi tôi sử dụng **ONDA PRO**, tôi đã rất ấn tượng với kết quả của Coolwaves điều trị trên vùng mặt. Trực giác của tôi nói rằng, vi sóng sẽ là một bước ngoặt mới trong thị trường thẩm mỹ vùng mặt và tôi đã đúng. Tôi sử dụng **ONDA PRO** để nâng cơ, săn chắc cũng như giảm mỡ và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Để đạt được hiệu quả đó, **ONDA PRO** có thể tác động chính xác tới từng độ sâu khác nhau trong da với từng loại tay cầm (3mm và 7mm) dựa trên mục đích điều trị (tác động nhiều hơn lên lớp hạ bì hoặc mỡ). Mang lại kết quả hoàn toàn thuyết phục với hiệu ứng nâng cơ, làm sáng và mịn màng da mặt mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trong quá trình điều trị, cảm giác khó chịu ở mức tối thiểu và có thể chấp nhận được.”

Dr. Josep h SeokBae Seo, MD-Dermatologist
(South Korea)

“**ONDA PRO** là một nền tảng mới, ban đầu được ứng dụng trong kiến tạo đường nét cơ thể nhưng giờ đây chúng ta có thể áp dụng công nghệ này cho vùng da mặt. Vi sóng cũng rất hiệu quả đối với làn da chùng nhão và chảy xệ vì **ONDA PRO** sử dụng vi sóng đặc biệt - không chỉ tác động đến lớp mỡ trên khuôn mặt mà còn tương tác với collagen, chúng ta có thể cá nhân hóa từng ứng dụng điều trị bằng cách sử dụng những loại tay cầm khác nhau: 3mm (Pocket) và 7mm (Shallow - tác động sâu hơn để giảm mỡ vùng mặt), vì vậy chúng tôi có thể linh hoạt ứng dụng những tay cầm này cho bất kì vấn đề như: Khuôn mặt to, da chảy xệ, săn chắc và hiệu ứng nâng cơ.

Nhờ loại năng lượng vi sóng đặc biệt này, mà hầu như việc điều trị không có tác dụng phụ: hoàn toàn không gây đau, chỉ có cảm giác ấm nóng nhẹ và không có bất kỳ ban đỏ hay sưng tấy nào. Chúng tôi đã có thể giải quyết một số vấn đề và đã giảm ít nhất 50% số ca phẫu thuật thẩm mỹ vì chúng tôi nhận thấy được hiệu ứng nâng cơ vùng mặt tuyệt vời (tương tác tối đa với tình trạng chùng nhão và các sợi collagen). Một trong những đặc điểm của CoolWaves so với RF là có thể tác động nhiệt kéo dài đối với mô: có kết quả tuyệt vời ngay cả ở vùng tiếp giáp (như là mí mắt dưới và đường viền hàm) vì những vùng này dễ bị ảnh hưởng bởi khuếch tán nhiệt.

Điều này làm cho phương thức điều trị của **ONDA PRO** trở nên độc nhất trên thị trường vì hiện tại, chúng ta không có bất kỳ công cụ nào khác có khả năng cho ra kết quả như thế. Tóm lại, chúng ta có thể nói **ONDA PRO** - cụ thể ứng dụng để điều trị cho vùng mặt - được coi là một phương thức trị liệu mang tính biểu tượng mới trong lĩnh vực thẩm mỹ cũng như trong phương pháp điều trị săn chắc và nâng cơ vùng mặt. Chúng ta có thể đạt được những kết quả mỹ mãn mà không tốn vật tư tiêu hao.”

Prof. Paolo Bonan, MD- Dermatologist
Florence (Italy)

ONDA PRO IS SUSTAINABLE

Tất cả các hệ thống và thiết bị của DEKA đều được thiết kế và lắp ráp để đạt được những mục tiêu bền vững cũng như giúp chuỗi cung ứng có thể truy xuất minh bạch và đáng tin cậy. DEKA đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn môi trường quốc tế vì chính mình và các nhà cung cấp của DEKA.

SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO

Điểm mạnh ONDA PRO

- **CoolWaves ONDA PRO** mang tính chọn lọc cao hơn nhờ vào **công nghệ PGW mới**
- **Coolwaves** là phương thức đầu tiên điều trị giảm mỡ, săn chắc da và định hình cấu trúc mô không xâm lấn
- Thích hợp **cho mọi loại da**
- **Không tốn thời gian nghỉ dưỡng hoặc bị bầm tím**
- **Trải nghiệm tuyệt vời**
Không gây đau như khi điều trị, định hình cơ thể bằng phương pháp xâm lấn hay phẫu thuật
- **Bộ ba tay cầm tác động chọn lọc** đến từng độ sâu khác nhau
- Tập trung vào tính **An toàn và Hiệu quả**
- **Không tốn vật tư tiêu hao**

Chỉ dành cho người dùng DEKA:

Sự hỗ trợ tuyệt vời trong thực hành y khoa



DEKA Club

Giao diện mới,
thân thiện với người dùng

Tay cầm công thái học
(POCKET, SHALLOW, DEEP)



Đèn LED

COOLWAVES®

CÔNG NGHỆ PGW



Scan and see
ONDA PLUS in action

Thông số kỹ thuật

ONDA PRO	
Nguồn	Vi sóng - Coolwaves® (Công nghệ PGW)
Tần số	2.45 GHz
Công suất	Lên đến 200 W
Tay cầm thông minh	Deep - Shallow - Pocket
Tay cầm làm lạnh	Tính hợp hệ thống làm mát (đã cấp bằng sáng chế)
Kiểm soát điều trị	Công tắc tay
Cơ sở dữ liệu	Tích hợp Protocol hướng dẫn điều trị
Kích thước và trọng lượng	110 (H) cm x 40 (W) x 70 (D) cm 60 Kg
Yêu cầu về điện	100-240 Vac - 50/60 Hz - 1500 VA

Brochure này không dành cho thị trường USA.

CE
0123

onda
PRO

Phân phối bởi

TRANFA

HỒ CHÍ MINH:

Tầng trệt Khối Căn Hộ B, Khu phức hợp Sài Gòn Airport Plaza,
01 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
(+84) 28 6676 2308 - Hotline 0902 380 580
info@tranfa.vn - www.tranfa.vn

HÀ NỘI:

0899 132 343 - hanoi@tranfa.vn

Đơn vị phân phối đạt Chứng nhận hệ thống Quản lý
Chất lượng ISO 9001:2015

DEKA
Innate Ability

Follow us on
   
www.dekalaser.com



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA Innate Ability

DEKA - Công ty con của Tập đoàn El.En., - là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và sản xuất tia laser và nguồn sáng cho các ứng dụng trong lĩnh vực y tế. DEKA ra mắt các thiết bị của mình tại hơn 80 quốc gia với mạng lưới phân phối phủ toàn cầu cũng như văn phòng trực tiếp tại Ý, Pháp, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Sự xuất sắc chính là dấu ấn chứng minh cho kinh nghiệm và sự công nhận có được trong lĩnh vực R&D trong hơn ba mươi năm hoạt động DEKA. Chất lượng, sự đổi mới và tính ưu việt về công nghệ giúp DEKA và các sản phẩm đứng vững ở vị trí độc nhất và khác biệt trên thị trường quốc tế. DEKA sản xuất các thiết bị laser tuân theo các thông số kỹ thuật của Directive 93/42/EEC và hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485.