


Kim chọc hút sinh thiết sử dụng một lần

ViziShot 2


Cải thiện khả năng tiếp cận và tăng cường khả năng đâm xuyên
hạch để lấy mẫu hiệu quả hơn trong EBUS-TBNA

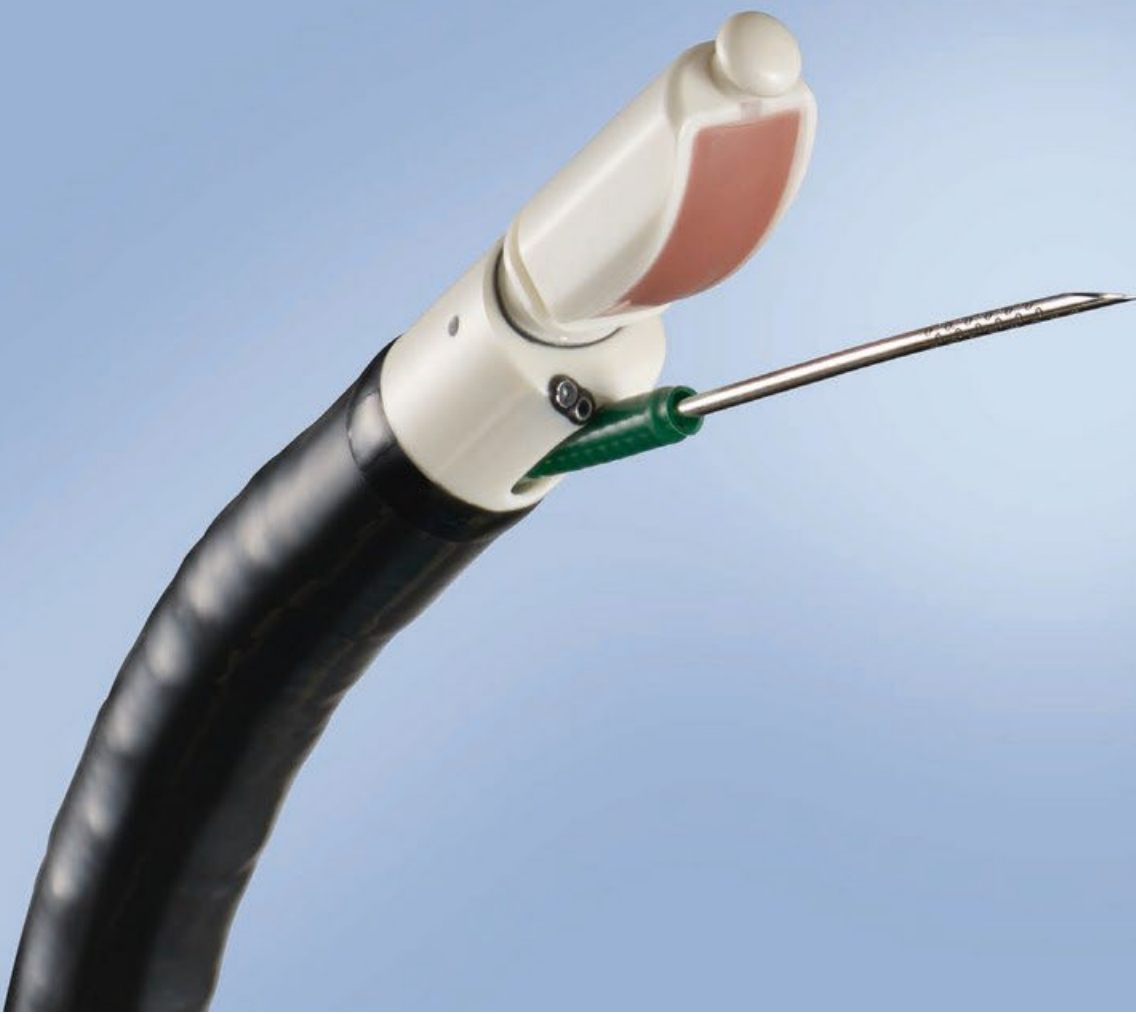

Đặc điểm


Cải thiện độ linh hoạt

Thiết kế kim tiên tiến cho phép cải thiện độ linh hoạt, giúp hỗ trợ tiếp cận các mục tiêu trong phế quản vốn thường khó tiếp cận bằng các loại kim truyền thống.

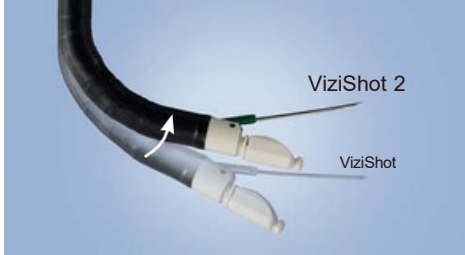

Cơ chế an toàn

ViziShot2 tích hợp cơ chế an toàn kép, khóa cần điều chỉnh kim và khóa rút kim.

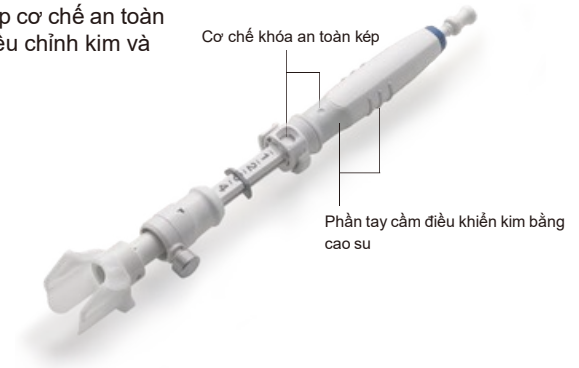

Tăng cường khả năng đâm xuyên

Thiết kế đầu kim sắc bén hơn giúp giảm lực đâm xuyên cần thiết khi thực hiện lấy mẫu.



Thiết kế công thái học

Thiết kế mới dễ sử dụng với phần tay cầm bằng cao su giúp hỗ trợ kiểm soát kim và cải thiện độ ổn định.



Tăng khả năng quan sát vỏ kim

Đầu vỏ kim có màu giúp tăng khả năng hiển thị trong quá trình quan sát nội soi.




Hiệu quả phản hồi âm

Bề mặt kim có các vết lõm (dimpled) cho phép khả năng hiển thị dưới siêu âm xuất sắc.

Thông số kỹ thuật

Tên model	NA-U401SX-4021	NA-U401SX-4022
Đường kính tối đa phần làm việc	1,9 mm	
Chiều dài làm việc	700 mm	
Cỡ kim	21G	22G
Chiều dài kim	Bình thường	20 mm
	Tối đa	40 mm
Ống nội soi siêu âm OLYMPUS tương thích	Model và chiều dài làm việc	BF (600mm)
	Đường kính trong của kênh dụng cụ	2,0 mm/2,2 mm
	Hướng quét siêu âm	Song song với hướng chèn

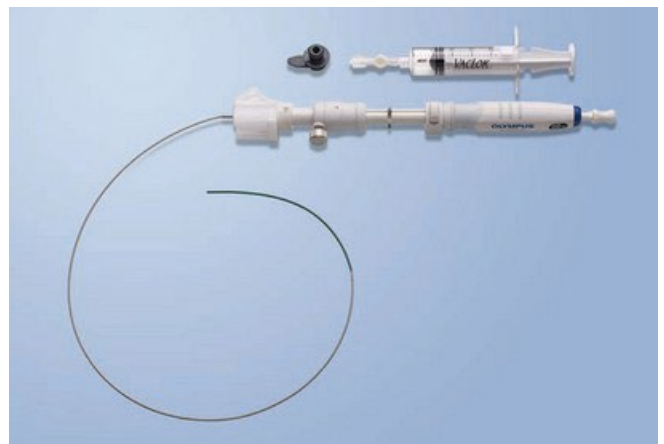

Thông số kỹ thuật, thiết kế và phụ kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước hoặc nghĩa vụ nào từ phía nhà sản xuất.