

Nong Nhanh Chóng & Dễ Dàng

- Thời gian bơm căng, đưa vào và xả bóng nhanh giúp cải thiện tốc độ và hiệu quả tổng thể của thủ thuật.
- Catheter bóng dạng low-profile được thiết kế để đưa vào và rút ra dễ dàng, nhanh chóng thông qua kênh của ống soi.

Chỉ định

- Bóng EZDilate loại Dây dẫn cố định được thiết kế để nong các vị trí hẹp trong thực quản.
- Bóng EZDilate loại Dẫn hướng bằng dây được thiết kế để nong các vị trí hẹp trong thực quản, môn vị, đại tràng và bóng Vater (cơ vòng Oddi – có hoặc không có cấu trúc vòng trước đó, chỉ dùng cho người lớn).
- Dây dẫn bằng thép không gỉ .035" có sẵn, hỗ trợ quá trình nong trong các cấu trúc giải phẫu ngoài ngoài.
- Bộ bóng nong EZDilate tương thích với bất kỳ thiết bị bơm nào có dung tích 60 cc.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG


BỘ BÓNG NONG EZDILATE LOẠI DÂY DẪN CỐ ĐỊNH, DÙNG MỘT LẦN – THỰC QUẢN (1 HỘP)						
Mã sản phẩm	Đường kính ngoài khi bơm Ø (mm)	Đường kính ngoài khi bơm Ø (Fr)	Áp suất bơm (atm)	Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu Ø (mm)	Chiều dài làm việc (mm)	Chiều dài bóng (mm)
BD-400P-0880	6,0 – 7,0 – 8,0	18-21-24	2,0-5,5-9,5	2,8	1900	90
BD-400P-1080	8,5 – 9,5 – 10,5	25,5-28,5-31,5	2,0-5,5-9,5	2,8	1900	90
BD-400P-1380	11,0 – 12,0 – 13,0	33-36-39	2,0-3,5-5,5	2,8	1900	80
BD-400P-1580	13,5 – 14,5 – 15,5	40,5-43,5-46,5	2,5-4,0-6,0	2,8	1900	80
BD-400P-1880	16,0 – 17,0 – 18,0	48-51-54	2,5-4,0-5,5	2,8	1900	80
BD-400P-2080	18,0 – 19,0 – 20,0	54-57-60	2,5-3,5-5,0	2,8	1900	80

BỘ BÓNG NONG EZDILATE LOẠI DẪN HƯỚNG BẰNG DÂY, DÙNG MỘT LẦN – THỰC QUẢN, MÔN VỊ, ĐẠI TRÀNG, ĐƯỜNG MẬT (1 HỘP)							
Mã sản phẩm	Đường kính ngoài khi bơm Ø (mm)	Đường kính ngoài khi bơm Ø (Fr)	Áp suất bơm (atm)	Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu Ø (mm)	Chiều dài làm việc (mm)	Chiều dài bóng (mm)	Đường kính dây dẫn Ø (Dây có sẵn & Tương thích)
BD-410X-0855	6,0 – 7,0 – 8,0	18-21-24	2,0-5,5-9,5	2,8 mm	2400	65	.035"
BD-410X-1055	8,5 – 9,5 – 10,5	25,5-28,5-31,5	2,0-5,5-9,5	2,8 mm	2400	65	.035"
BD-410X-1355	11,0 – 12,0 – 13,0	33-36-39	2,0-3,5-5,5	2,8 mm	2400	55	.035"
BD-410X-1555	13,5 – 14,5 – 15,5	40,5-43,5-46,5	2,5-4,0-6,0	2,8 mm	2400	55	.035"
BD-410X-1855	16,0 – 17,0 – 18,0	48-51-54	2,5-4,0-5,5	2,8 mm	2400	55	.035"
BD-410X-2055*	18,0 – 19,0 – 20,0	54-57-60	2,5-3,5-5,0	2,8 mm	2400	55	.035"

* chỉ định cho thực quản, đại tràng và đường mật

THIẾT BỊ BƠM BÓNG NONG NỘI SOI, DÙNG MỘT LẦN (1 HỘP) **		
Mã sản phẩm	Dung tích ống tiêm (cc)	Áp suất tối đa (atm)
MAJ-1740	60	15

** Phụ kiện tùy chọn – Bộ bóng giãn nở EZDilate Dây cố định và Dẫn hướng bằng dây tương thích với bất kỳ thiết bị bơm 60 cc nào.

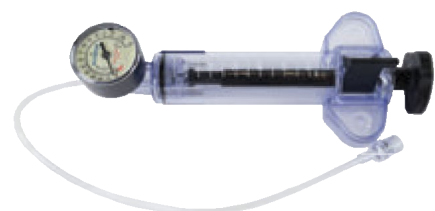

© 2015 Olympus America Inc. Bảo lưu mọi quyền. In tại Hoa Kỳ. ™ & © là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Olympus hoặc các đơn vị liên kết tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác trên thế giới. Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. OAIURO0815BROxxxx

OLYMPUS AMERICA INC.
3500 Corporate Parkway, PO Box 610, Center Valley, PA 18034

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu đặt hàng,
vui lòng gọi 800-848-9024 hoặc truy cập
www.medical.olympusamerica.com

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

EndoTherapy

EZDilate

BÓNG NONG DÙNG TRONG NỘI SOI

Bóng căng chính xác có kiểm soát: Độ tin cậy trong việc xác định kích thước chuẩn xác

Vị trí đặt chính xác: Tự tin trong định vị bóng với độ hiển thị tối ưu

Đa dụng trong thiết kế và hiệu suất: Mở rộng các lựa chọn thủ thuật



NONG HƯỚNG TÂM CÓ KIỂM SOÁT VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN

BÓNG NONG EZDILATE BA CỖ MANG LẠI KHẢ NĂNG NONG TỪ TỪ VÀ CHÍNH XÁC

Được chỉ định sử dụng cho các vị trí hẹp trong toàn bộ đường tiêu hóa — bao gồm nong cơ vòng Oddi (Nong bóng nhú tá tràng qua nội soi/ EPBD).

EZDilate hỗ trợ đặt chính xác vào vị trí hẹp nhờ đánh dấu độ dẻo ở tâm bóng, cùng với khả năng quan sát vượt trội qua bóng trong quá trình nong, giúp theo dõi vị trí hẹp một cách hiệu quả hơn.

Tính linh hoạt trong thiết kế và hiệu suất

- Danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu thủ thuật trên toàn bộ đường tiêu hóa — bao gồm cả ứng dụng đường mật.
- Kích thước độ dẻo và chính xác cho phép bơm bóng theo mỗi bước 0,5 mm.
- Bóng tương thích với bơm 60 cc — mang lại tính linh hoạt theo thói quen của bác sĩ và tổng thể sử dụng dễ dàng.

DÂY DẪN CỐ ĐỊNH: chỉ định cho nong thực quản



DẪN HƯỚNG BẰNG DÂY: chỉ định cho nong thực quản, môn vị, đại tràng và nhú tá tràng



Có sẵn ở cả hai thiết kế: **DÂY DẪN CỐ ĐỊNH** và **DẪN HƯỚNG BẰNG DÂY**, với các kích thước từ 6-7-8 mm đến 18-19-20 mm.

Vị trí đặt bóng chính xác: Tự tin trong việc Xác định vị trí với Độ rõ nét tối ưu


Thiết kế catheter dạng low-profile và lớp phủ bóng chuyên dụng giúp đưa vào một cách trơn tru, hiệu quả với lực cản tối thiểu.

Các đánh dấu cận tia X giúp tăng cường khả năng quan sát dưới màn hình quang.

Đánh dấu trung tâm giúp hỗ trợ việc đặt bóng, tăng độ chính xác và khả năng tiếp cận các vị trí hẹp trong quá trình nong

Chất liệu nylon siêu trong suốt giúp tăng cường khả năng quan sát vùng hẹp qua bóng trong quá trình nong.

Độ Căng Của Bóng – Loại Dây dẫn cố định 18-19-20 mm (Đường kính thực tế trong 3 giai đoạn bơm bóng)

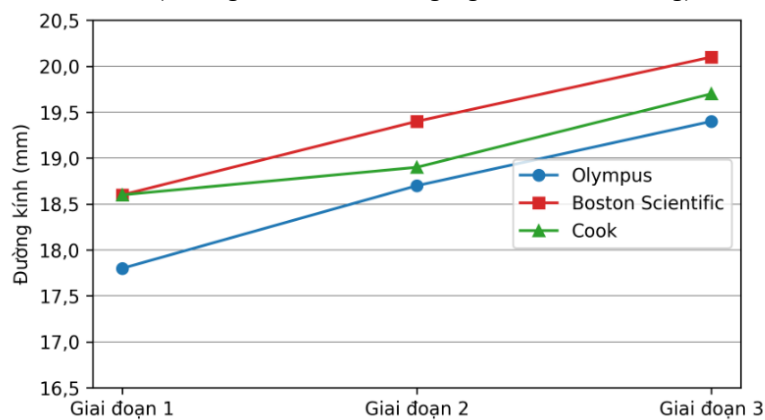

Dữ liệu trên tệp tin

Bóng căng chính xác có kiểm soát

- Được thiết kế để mang lại độ chính xác và độ chuẩn vượt trội về đường kính mà không cần phải bơm căng quá mức để đạt được kick thước mục tiêu.
- Chất liệu nylon bền chắc giúp phân tán áp lực hướng tâm dọc theo toàn bộ chiều dài của bóng, đảm bảo quá trình nong bóng ổn định, lặp lại được và giảm thiểu hiện tượng “thắt eo” của bóng.
- Bóng bán giãn nở được thiết kế để duy trì đường kính và hình dạng ở tất cả các loại vị trí hẹp.

Đầu xa không gây chấn thương được thiết kế để bảo vệ kênh dụng cụ của ống soi và hỗ trợ điều hướng qua các vùng giải phẫu nhạy cảm.

